



## Analyse microbiologique des Produits laitiers UHT & ESL

Contrôle microbiologique rapide de vos produits

Pas de préparation de l'échantillon

Facile à utiliser

2 Jours d'incubation

Analyse automatique des données


Jusqu'à 96 échantillons en 20 min

Logiciel développé spécifiquement

Gestion intelligente des volumes de réactifs


Base de données sécurisée

Fonction de recherche de données flexible

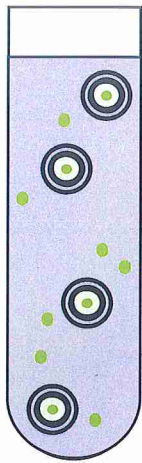


Microorganismes


ATP Libre

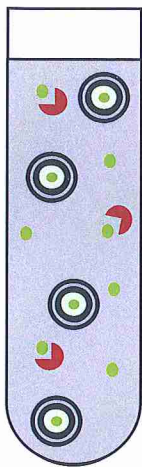


Proase est ajoutée pour détruire l'ATP Libre

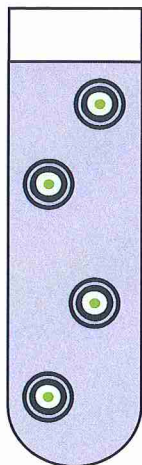

Après quelques minutes l'échantillon ne contient plus que les cellules microbiennes avec leur ATP

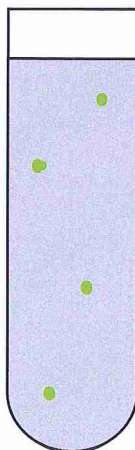

Promex ouvre les cellules microbiennes pour libérer l'ATP

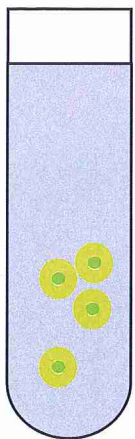

Prolux est ajouté, et réagit en présence d'ATP pour produire de la lumière

## Système Promicol®; instrument, logiciel, réactifs, service

Instruments adaptés au débit analytique

Composition du kit spécifique par client

Détection précoce des défauts en cours de process

Amélioration de l'efficacité

Réduction des coûts

Libération plus rapide des produits finis

Confirmez vos standards d'excellence

Plus d'efficacité grâce à la chaîne robotisée Promicol



**DISTRIBUE PAR**

**EQUIPEMENT, USAGE UNIQUE, REACTIFS,  
AUTOMATES POUR LABORATOIRES D'ANALYSES  
MEDICAL - INDUSTRIES - RECHERCHE**

Le Gemellyon Nord - 57 Bld Vivier Merle - 69429 LYON Cedex 3 - France  
courriel : euralam.info@euralam.com T. 33 (0)4 72 68 71 71 - F.33 (0)4 72 35 16 87

14uhtesI01F

